


美国信合免疫诊断公司 AccuAffinity, Inc.
 公司地址: 4062 Fabian Way, Suite 3B, Palo Alto, CA 94303, U.S.A.
 电话: 001-408-368-1364
 公司网址: www.accuaffinity.com
 公司邮箱: contact@accuaffinity.com

饲料及奶制品三聚氰胺快速检测 ELISA 试剂盒产品介绍


(产品编号: AAF-21102)

- 同一试剂盒和一套标准品可同时准确检测饲料及奶制品, 基线一致
- 所测奶制品不需进行任何前处理 (例如抽提和离心), 节省时间, 减少工作量
- 奶制品样品中三聚氰胺检测下限低至 1 ppb (优于其它同类产品 10 倍以上)
- 饲料样品仅需研碎用水浸泡, 然后用样品稀释液稀释, 简便迅速
- 饲料样品中三聚氰胺检测下限低至 200 ppb (优于其它同类产品)
- 反应时间短, 仅需 30 分钟出结果
- 定量范围广, 精确度高, 误差小
- 操作简便, 只需加样及洗板一次
- 室温反应, 不需保温箱及摇床
- 产品性能稳定, 易于贮存和运输
- 不需自备任何其它试剂
- 不涉及任何对人体有危害的有机溶剂

饲料及奶制品样品回收率测定		
样品	三聚氰胺浓度	平均回收率
饲料	5 ppm	94.0%
饲料	10 ppm	87.7%
饲料	25 ppm	92.2%
鲜奶,奶粉	50 ppb	95.5%
鲜奶,奶粉	500 ppb	93.6%

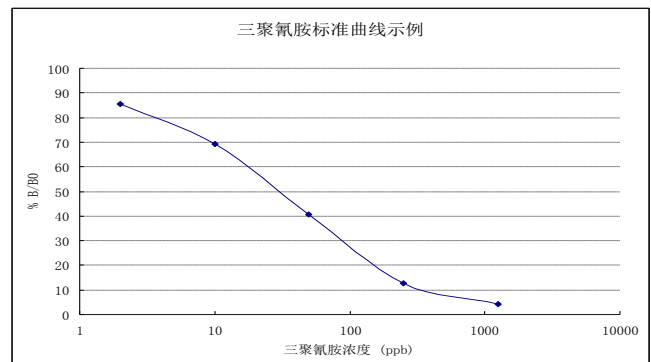

	浓度(ppb)	OD450nm	B/B0 (%)
B0	0	2.06	100
S1	2	1.76	85.6
S2	10	1.43	69.4
S3	50	0.83	40.5
S4	250	0.26	12.6
S5	1250	0.09	4.2

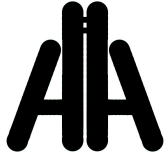

美国信合免疫诊断公司 AccuAffinity, Inc.

公司地址: 4062 Fabian Way, Suite 3B, Palo Alto, CA 94303, U.S.A.

电话: 001-408-368-1364

公司网址: www.accuaffinity.com

公司邮箱: contact@accuaffinity.com
